



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de l'épine nasale Obwegeser

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

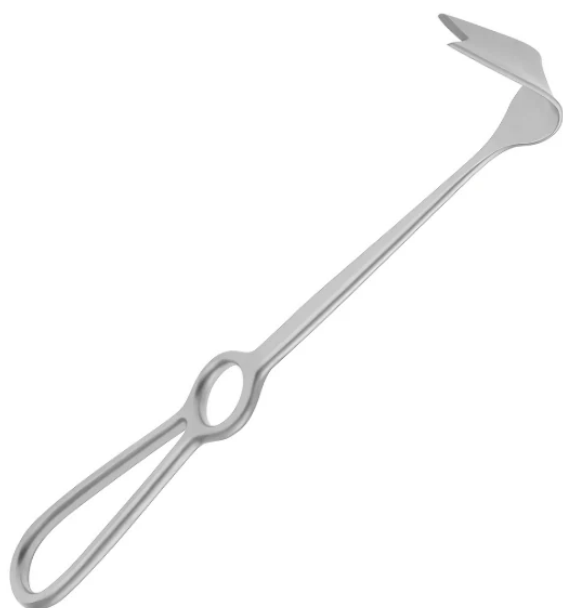

Écarteur de l'épine nasale Obwegeser

SKU RM-ONSR-22-1

\$49 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Obwegeser Nasal Spine Retractor	Longueur totale 22 cm, lame à encoche pour épine nasale	\$49
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$49

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de l'épine nasale Obwegeser est un instrument chirurgical de reconstruction faciale et orthognathique indispensable, conçu spécifiquement pour assurer une élévation des tissus et une stabilisation osseuse sûres et antidérapantes au niveau de l'épine nasale antérieure lors des ostéotomies Le Fort I. Conçu avec une lame en selle à encoche anatomique, cet instrument chevauche proprement l'épine nasale, écartant la lèvre supérieure, la columelle et le septum cartilagineux en toute sécurité à l'écart des scies à os alternatives.

Construit pour une profondeur de champ intra-orale optimale, cette configuration d'écarteur de l'épine nasale Obwegeser présente une longueur totale d'outil de 22 cm (\$49). Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'extrémité de la lame bifurquée s'appuie solidement sur l'épine nasale antérieure osseuse, empêchant tout glissement accidentel sur l'os cortical tout en offrant aux assistants chirurgicaux une contre-traction manuelle stable et sans fatigue. La tige élancée s'abaisse en toute sécurité en dehors de la ligne de mire directe du chirurgien.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur de l'épine nasale Obwegeser pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant une durabilité exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une stérilisation complète en autoclave pour les centres de chirurgie buccale, maxillo-faciale et plastique faciale du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest