



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Système d'Écarteurs Tubulaires

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron

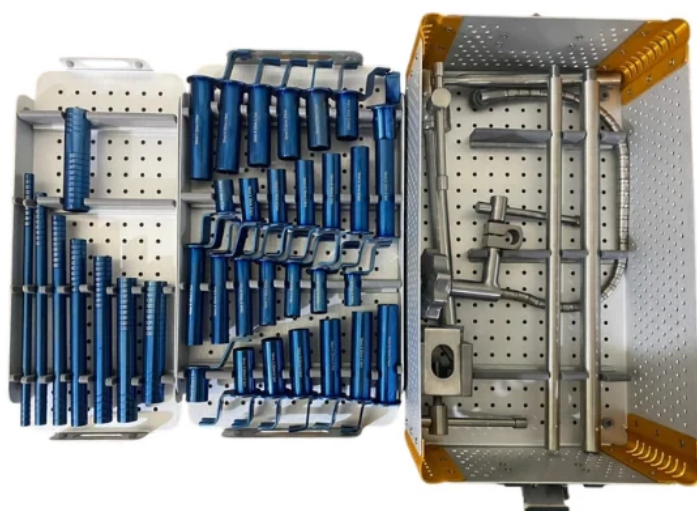

Système d'Écarteurs Tubulaires

SKU RM-TRS-MIS-1

\$2,199 USD

Liste des Composants

Quantité	Composant	Dimensions / Description
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 12-14 mm, longueur 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 12-14 mm, longueur 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 12-14 mm, longueur 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 12-14 mm, longueur 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 12-14 mm, longueur 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 12-14 mm, longueur 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 12-14 mm, longueur 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 14-16 mm, longueur 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 14-16 mm, longueur 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 14-16 mm, longueur 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 14-16 mm, longueur 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 14-16 mm, longueur 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 14-16 mm, longueur 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 14-16 mm, longueur 90 mm

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 16-18 mm, longueur 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 16-18 mm, longueur 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 16-18 mm, longueur 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 16-18 mm, longueur 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 16-18 mm, longueur 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 16-18 mm, longueur 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 16-18 mm, longueur 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 18-20 mm, longueur 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 18-20 mm, longueur 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 18-20 mm, longueur 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 18-20 mm, longueur 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 18-20 mm, longueur 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 18-20 mm, longueur 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 18-20 mm, longueur 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 27-29 mm, longueur 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 27-29 mm, longueur 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 27-29 mm, longueur 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 27-29 mm, longueur 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 27-29 mm, longueur 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 27-29 mm, longueur 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Diamètre 27-29 mm, longueur 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diamètre 6 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diamètre 8 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diamètre 10 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diamètre 12 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diamètre 14 mm

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diamètre 16 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Diamètre 18 mm
1	Tubular Flexible Arm	Bras de maintien articulé multi-joints
1	Table Clamp Set	Fixation pour rail de table d'opération
1	Sterilization Box	Boîtier adapté pour un retraitement organisé

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le système d'écarteurs tubulaires est une plateforme d'instruments chirurgicaux mini-invasifs essentielle, conçue pour créer des corridors d'accès préservant les muscles lors d'interventions rachidiennes complexes. En facilitant une dilatation tissulaire séquentielle plutôt qu'un décollement musculaire traumatique, ce système minimise considérablement les dommages tissulaires, réduit les douleurs postopératoires et raccourcit les délais de récupération des patients.

Conçu pour une polyvalence procédurale sur les segments cervicaux et lombaires, le système d'écarteurs tubulaires comprend un ensemble complet de ports tubulaires spécialisés couvrant des diamètres de 12-14 mm, 14-16 mm, 16-18 mm, 18-20 mm et 27-29 mm, pour des longueurs allant de 30 mm à 90 mm. Le kit inclut des dilateurs séquentiels de 6 mm à 18 mm, un étau de rail de table rigide et un bras articulé flexible qui se fixe solidement à la table d'opération pour verrouiller rigidement le tube de travail sur l'espace discal cible.

Usiné avec précision en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) non magnétique avec une finition satinée antireflet, Retractor Maker fournit le système d'écarteurs tubulaires complet non stérile et entièrement autoclavable dans une boîte de stérilisation dédiée, garantissant une gestion optimale de la stérilité et une rotation organisée du bloc opératoire.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest