



FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Autoestático Scoville

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

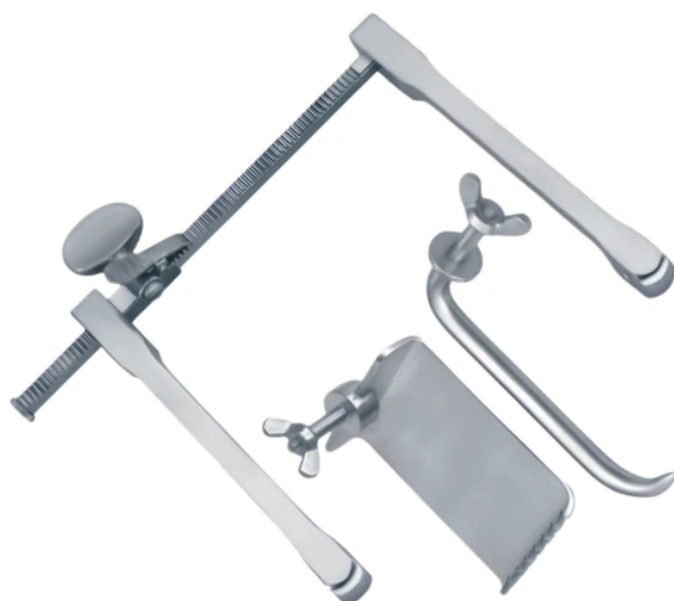

Afastador Autoestático Scoville

SKU RM-SSRR-150-1

\$259 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Estrutura de Trilho Guia Autoestática	Trilho deslizante de base principal projetado para exposições em cavidades neurocirúrgicas e espinhais
1	Lâmina Lateral de Garra Única Afiada Destacável	Lâmina de garra única de 50 mm projetada para ancorar profundamente abaixo de linhas de incisão pesadas
1	Lâmina Lateral Dentada Sólida Destacável	Lâmina de afastamento ósseo sólido de 60 mm x 25 mm equipada com pontas dentadas estruturadas
1	Trava de Parafuso Manual Integrada	Conjunto de rosca que garante a abertura horizontal exata enquanto reduz a fadiga do usuário
2	Braços de Pinça de Afastamento Ergonômicos	Hastes leves de braço duplo construídas com bordas perimetrais completamente lisas
1	Caixa / Armazenamento Protetor	Embalagem padrão de transporte

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Autoestático Scoville é um sistema de afastamento cirúrgico espinhal aclamado internacionalmente, desenvolvido especificamente para fornecer deslocamento muscular paraespinhal profundo e mãos livres e exposição laminar durante a descompressão lombar posterior. Projetado com um trilho guia deslizante ultrarrígido, este instrumento mantém planos musculares densos do multífido e longuíssimo afastados sob tensão mecânica travada, eliminando a fadiga manual do assistente enquanto preserva um corredor visual aberto e estático até a lâmina vertebral.

Construído conforme especificações clínicas, este conjunto completo do Afastador Autoestático Scoville (\$259) apresenta uma estrutura de trilho guia deslizante paralelo com abertura horizontal de até 150 mm de expansão máxima. Produzido artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o sistema modular inclui uma lâmina lateral de pino afiado único destacável com profundidade operacional de 50 mm, projetada para ancorar profundamente abaixo de linhas de incisão pesadas sem deslizar, emparelhada com uma lâmina lateral dentada sólida destacável medindo 60 mm × 25 mm (25 mm de largura × 60 mm de comprimento) para afastar camadas ósseas e musculares de forma limpa. Sua engrenagem de trava de parafuso manual integrada fixa rigidamente a abertura horizontal exata, enquanto as hastes ergonômicas das pinças de afastamento de braço duplo possuem perímetros externos lisos para proteger os tecidos circundantes.

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Autoestático Scoville para suportar imensa contração mecânica e repetidos ciclos de autoclave hospitalar, fornecendo a salas de neurocirurgia, centros de coluna e unidades de trauma ortopédico em todo o mundo rigidez estrutural excepcional, resistência à corrosão e durabilidade completa em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)