



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador para Cirugía Rectal/Transanal Bookwalter

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

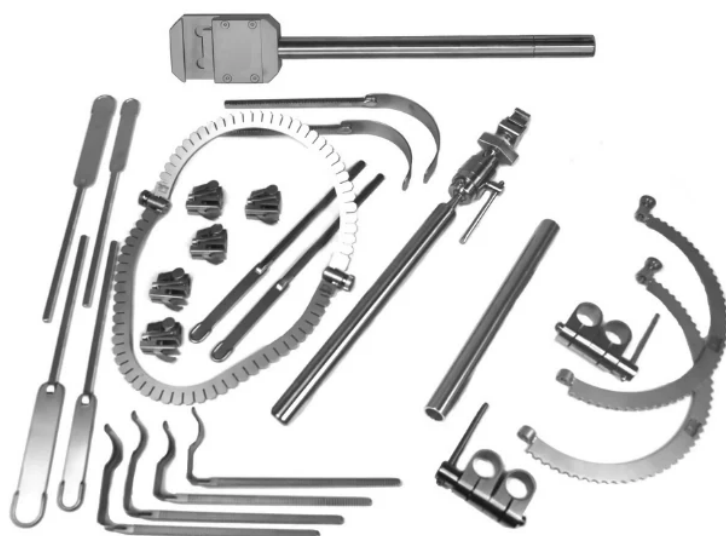

Separador para Cirugía Rectal/Transanal Bookwalter

SKU RM-BRTASR-1

\$2,199 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Poste de campo	12" (30 cm)
2	Acopladores de poste de Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético)	1" x 1" (2.5 cm x 2.5 cm)
2	Barras flexibles horizontales	1" Diámetro (2.5 cm)
1	Barra de extensión vertical	12" (30 cm)
5	Cremalleras de inclinación	Multiangulares estándar
1	Anillo pequeño de medio círculo	8½" (21.3 cm) DI
1	Anillo perineal segmentado	9½" x 14½" (23.8 cm x 36.3 cm)
2	Valvas rectales	7/8" x 37/8" (2.2 cm x 9.7 cm)
2	Valvas rectales	7/8" x 27/8" (2.2 cm x 7.2 cm)
2	Valvas maleables	1" x 3½" (2.5 cm x 10 cm)
2	Valvas maleables	½" x 4" (1.3 cm x 8.8 cm)
2	Valvas maleables	¾" x 4" (1.9 cm x 10 cm)
2	Valvas Deaver	1" x 3½" (2.5 cm x 8.8 cm)

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Caja de esterilización	Estuche protector

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador para Cirugía Rectal/Transanal Bookwalter es un sistema de retracción autoestático montado en mesa diseñado para proporcionar una exposición quirúrgica estable y manos libres durante procedimientos colorrectales, transanales, rectales y perineales. Su estructura de montaje utiliza un poste de campo de 12" (30 cm), dos barras flexibles horizontales de 1" de diámetro, una barra de extensión vertical de 12" (30 cm) y dos acopladores de poste de Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), lo que permite un posicionamiento flexible del marco con respecto a la mesa de operaciones y la posición del paciente.

El marco de trabajo puede ensamblarse a partir de un anillo perineal segmentado de 9½" × 14½" (23.8 × 36.3 cm) o un anillo pequeño de medio círculo de 8½" (21.3 cm) de diámetro interno, según el abordaje. Cinco cremalleras de inclinación multiangulares estándar se acoplan al anillo y permiten que cada valva se angule y se tense de forma independiente.

El juego de valvas incluido cubre una gama de requisitos de exposición: valvas rectales en tamaños de ⅞" × 3⅞" y ⅞" × 2⅞", valvas maleables en tamaños de 1" × 3½", ½" × 4" y ¾" × 4", y valvas Deaver de 1" × 3½". Todos los componentes están fabricados en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético).

El Separador para Cirugía Rectal/Transanal Bookwalter se suministra no estéril, es reutilizable y totalmente autoclavable. El Separador para Cirugía Rectal/Transanal Bookwalter debe limpiarse y esterilizarse de acuerdo con los procedimientos validados del centro sanitario antes de su uso. Retractor Maker fabrica el sistema en Sialkot, Pakistán, y lo suministra directamente a hospitales, cirujanos y distribuidores.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest