



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de chirurgie rectale/trans-anale Bookwalter

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron

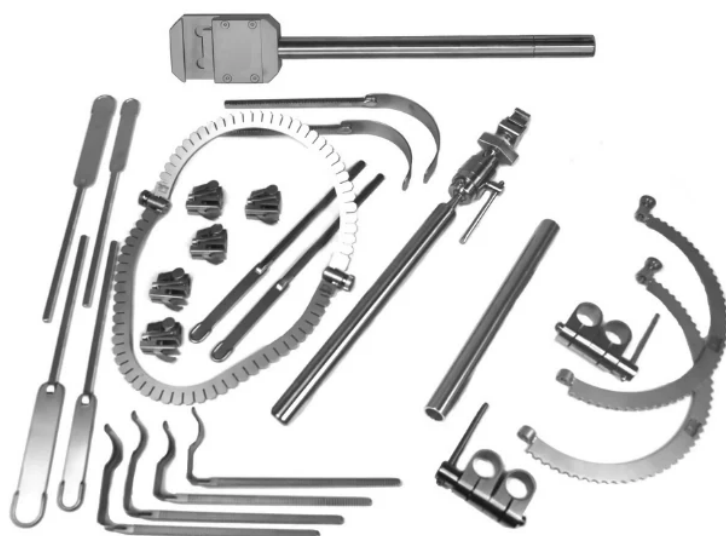

Écarteur de chirurgie rectale /trans-anale Bookwalter

SKU RM-BRTASR-1

\$2,199 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Montant de champ	12" (30 cm)
2	Raccords de montant en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique)	1" x 1" (2.5 cm x 2.5 cm)
2	Barres flexibles horizontales	Diamètre 1" (2.5 cm)
1	Barre d'extension verticale	12" (30 cm)
5	Crémaillères inclinables	Multi-angles standard
1	Petit anneau en demi-cercle	8½" (21.3 cm) DI
1	Anneau périnéal segmenté	9½" x 14½" (23.8 cm x 36.3 cm)
2	Valves rectales	7/8" x 37/8" (2.2 cm x 9.7 cm)
2	Valves rectales	7/8" x 27/8" (2.2 cm x 7.2 cm)
2	Valves malléables	1" x 3½" (2.5 cm x 10 cm)
2	Valves malléables	½" x 4" (1.3 cm x 8.8 cm)
2	Valves malléables	¾" x 4" (1.9 cm x 10 cm)
2	Valves Deaver	1" x 3½" (2.5 cm x 8.8 cm)

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Boîte de stérilisation	Boîtier de protection

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de chirurgie rectale/trans-anale Bookwalter est un système d'écartement autostatique fixé à la table, conçu pour offrir une exposition chirurgicale stable et mains libres lors des interventions colorectales, trans-anales, rectales et périnéales. Son cadre de montage utilise un montant de champ de 12" (30 cm), deux barres flexibles horizontales de 1" de diamètre, une barre d'extension verticale de 12" (30 cm) et deux raccords de montant en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) de 1" x 1", permettant un positionnement flexible du cadre par rapport à la table d'opération et à la position du patient.

Le cadre de travail peut être assemblé à partir d'un anneau périnéal segmenté de 9½" x 14½" (23.8 x 36.3 cm) ou d'un petit anneau en demi-cercle de 8½" (21.3 cm) de diamètre interne, selon l'approche chirurgicale. Cinq crémaillères inclinables multi-angles standard se fixent à l'anneau et permettent d'orienter et de mettre sous tension chaque valve indépendamment.

Le jeu de valves inclus couvre une large gamme de besoins d'exposition : valves rectales de ⅞" x 3⅞" et ⅞" x 2⅞", valves malléables de 1" x 3½", ½" x 4" et ¾" x 4", et valves Deaver de 1" x 3½". Tous les composants sont fabriqués en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique).

L'écarteur de chirurgie rectale/trans-anale Bookwalter est livré non stérile, il est réutilisable et entièrement autoclavable. L'écarteur de chirurgie rectale/trans-anale Bookwalter doit être nettoyé et stérilisé selon les procédures validées de l'établissement de santé avant utilisation. Retractor Maker fabrique le système à Sialkot, au Pakistan, et le fournit directement aux hôpitaux, aux chirurgiens et aux distributeurs.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest