



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Système d'écarteur général de base Bookwalter
StrongArm

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015


✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

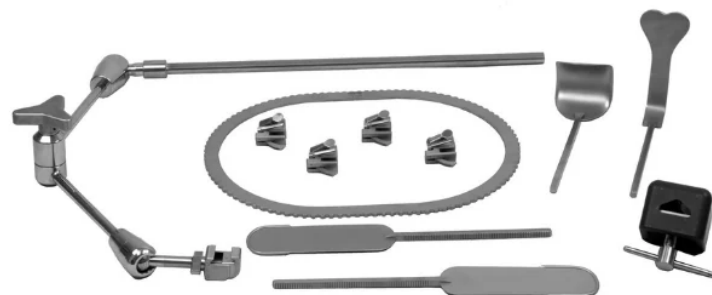

Système d'écarteur général de base Bookwalter StrongArm

SKU RM-BSABGRS-1

\$1,499 USD

Liste des composants

Quantité	Composant	Dimensions / Description
1	Support StrongArm PLUS à montage supérieur	Réglable en hauteur / Articulé
1	Anneau ovale, Moyen	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	Clamp de rail robuste	Compatible avec rail de table
4	Mécanisme de crémaillère inclinable	Multi-angles
1	Valve Balfour	2⅝" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
1	Valve Harrington	1" × 5⅝" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
2	Valves malléables	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Boîte de stérilisation	Étui de protection

Description du produit

Le système d'écarteur général de base Bookwalter StrongArm est un système d'écarteur autostatique monté sur le support et positionneur StrongArm PLUS. Le support est fixé à la table d'opération et maintient le cadre d'écartement en place, offrant une exposition chirurgicale stable et mains libres pendant les procédures de chirurgie générale ouverte.

Le système de montage se compose d'un support StrongArm PLUS articulé à montage supérieur, réglable en hauteur, associé à un clamp de rail robuste compatible avec le rail de la table. Le support porte un anneau ovale moyen mesurant 10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm), qui est positionné au-dessus de l'incision et verrouillé à la

hauteur et à l'angle de travail requis.

Quatre mécanismes de crémaillère à inclinaison multi-angles se fixent à l'anneau et maintiennent chaque valve à la profondeur et à l'inclinaison choisies. Le complément de valves de base comprend une valve Balfour de $2\frac{5}{8}$ " $\times$ 3" (6.7 $\times$ 7.6 cm), une valve Harrington de 1" $\times$ $5\frac{5}{8}$ " $\times$ $2\frac{1}{2}$ " (2.5 $\times$ 14.3 $\times$ 6.4 cm) et deux valves malléables de 2" $\times$ 6" (5.1 $\times$ 15.2 cm).

Tous les composants sont fabriqués en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique). Le système d'écarteur général de base Bookwalter StrongArm est neuf, réutilisable et entièrement autoclavable. Il est fourni non stérile — il doit être nettoyé et stérilisé conformément aux procédures validées de l'établissement de santé avant utilisation. Le système d'écarteur général de base Bookwalter StrongArm est livré dans une boîte de stérilisation qui protège et organise les composants. Retractor Maker fabrique le système à Sialkot, au Pakistan, et le fournit directement aux hôpitaux, chirurgiens et distributeurs, avec une quantité minimale de commande d'un ensemble complet.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest