



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Sistema Separador de Cirugía General Básica Bookwalter
StrongArm

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016


✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron

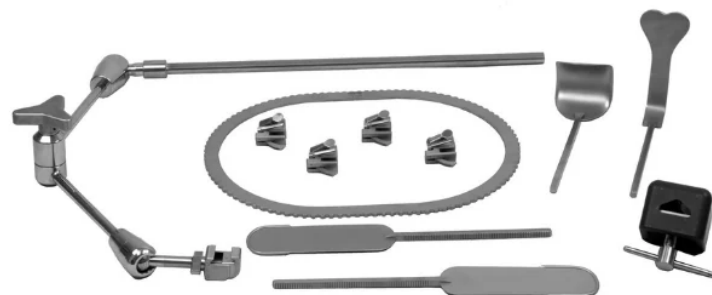

Sistema Separador de Cirugía General Básica Bookwalter StrongArm

SKU RM-BSABGRS-1

\$1,499 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Soporte StrongArm PLUS de montaje superior	Ajustable en altura / Articulado
1	Aro ovalado, mediano	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	Abrazadera de riel reforzada	Compatible con riel de mesa
4	Mecanismo de trinquete basculante	Multiángulo
1	Valva Balfour	2⅝" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
1	Valva Harrington	1" × 5⅝" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
2	Valvas maleables	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Caja de esterilización	Estuche protector

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El sistema separador de cirugía general básica Bookwalter StrongArm es un sistema autoestático montado sobre el soporte y posicionador StrongArm PLUS. El soporte se fija a la mesa de operaciones y mantiene el marco de separación en su lugar, proporcionando una exposición quirúrgica estable y manos libres durante procedimientos de cirugía general abierta.

El sistema de montaje consta de un soporte articulado StrongArm PLUS de montaje superior con ajuste de altura, junto con una abrazadera de riel de alta resistencia compatible con el riel de la mesa. El soporte sostiene un aro ovalado mediano de 10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm), el cual se posiciona sobre la incisión y se bloquea a

la altura y ángulo de trabajo requeridos.

Cuatro mecanismos de trinquete basculantes multiángulo se acoplan al aro y sujetan cada valva a la profundidad e inclinación seleccionadas. El complemento básico de valvas comprende una valva Balfour de $2\frac{5}{8}$ " $\times$ 3" (6.7 $\times$ 7.6 cm), una valva Harrington de 1" $\times$ $5\frac{5}{8}$ " $\times$ $2\frac{1}{2}$ " (2.5 $\times$ 14.3 $\times$ 6.4 cm) y dos valvas maleables de 2" $\times$ 6" (5.1 $\times$ 15.2 cm).

Todos los componentes están fabricados en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético). El sistema separador de cirugía general básica Bookwalter StrongArm es nuevo, reutilizable y totalmente autoclavable, y se suministra no estéril; debe limpiarse y esterilizarse conforme a los procedimientos validados del centro sanitario antes de su uso. El sistema se suministra en una caja de esterilización que protege y organiza los componentes. Retractor Maker fabrica el sistema en Sialkot, Pakistán, y lo suministra directamente a hospitales, cirujanos y distribuidores, con una cantidad mínima de pedido de un juego completo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest