



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Bookwalter Small Incision Retractor System

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

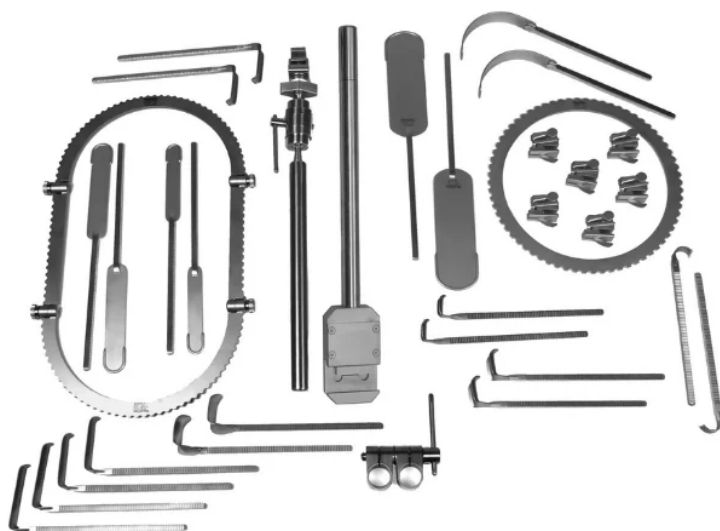

Bookwalter Small Incision Retractor System

SKU RM-BSIRS-1

\$2,199 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Stativstab	12" (30 cm) vertikaler Stützstab
1	Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch)-Stativkupplung	1" x 1" (2,5 x 2,5 cm) Hochleistungs-Schienenklemme
1	Horizontaler Flex-Stab	1" Durchmesser (2,5 cm) Mehrgelenkarm
1	Kleiner runder Vollring	8½" (21,3 cm) Innendurchmesser (ID)
1	Kleiner ovaler Segmentring	8½" x 14" (20 x 35 cm) klappbarer, konfigurierbarer Rahmen
6	Neigungsratschen	Flache mechanische Rahmenverriegelungen
2	Biegsame Valven	1" x 3½" (2,5 x 12,5 cm)
2	Biegsame Valven	¾" x 4" (1,9 x 10 cm)
2	Biegsame Valven	2" x 6" (5 x 15 cm)
2	Deaver-Valven	1" x 3½" (2,5 x 8,8 cm) gebogene Beckenvalven
2	Kelly-Valven	2" x 1½" (5 x 3,8 cm) flache, rechtwinklige Valven
2	Kelly-Valven	1" x 2½" (2,5 x 6,3 cm) rechtwinklige Valven
2	Kelly-Valven	1" x 3" (2,5 x 7,5 cm) rechtwinklige Valven

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
2	Tiefe Rake-Valven	$\frac{3}{4}$ " tief $\times$ $\frac{2}{3}$ " breit (1,9 $\times$ 1,7 cm) Mehrzinkenkrallen
2	Richardson-Valven	$\frac{3}{4}$ " $\times$ 2" (1,9 $\times$ 5 cm) flache Valven mit Lippe
2	Richardson-Valven	1" $\times$ 1 $\frac{1}{4}$ " (2,5 $\times$ 3,1 cm) flache Valven mit Lippe
2	Richardson-Valven	$\frac{3}{4}$ " $\times$ 1" (1,9 $\times$ 2,5 cm) flache Valven mit Lippe
1	Sterilisationsbox	Maßgeschneiderter perforierter Organisationsbehälter

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Bookwalter Small Incision Retractor System ist ein tischmontiertes, selbsthaltendes Retraktorsystem. Es wird am Operationstisch verankert und fixiert jede Valve in Position, um eine stabile, freihändige chirurgische Exposition bei Eingriffen durch kleine Inzisionen zu gewährleisten, bei denen ein präziser Zugang unter Minimierung der Gewebetrauma erforderlich ist.

Das Montagesystem umfasst einen 12" (30 cm) Stativstab, eine 1" $\times$ 1" (2,5 $\times$ 2,5 cm) Hochleistungs-Schienenklemme aus Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) und einen gelenkigen horizontalen Flex-Stab mit 1" (2,5 cm) Durchmesser. Zwei Ringoptionen sind enthalten: ein kleiner runder Vollring mit 8 $\frac{1}{2}$ " (21,3 cm) Innendurchmesser und ein kleiner ovaler Segmentring mit den Maßen 8 $\frac{1}{2}$ " $\times$ 14" (20 $\times$ 35 cm), der klappbar ist, um den Rahmen um die Inzision herum neu zu konfigurieren.

Sechs flache Neigungsratschen rasten am Ring ein und halten jede Valve in der erforderlichen Tiefe und im gewünschten Winkel. Das Valvenset umfasst biegsame Valven in drei Größen, gebogene Deaver-Beckenvalven, flache, rechtwinklige Kelly-Valven in drei Größen, mehrzinkige tiefe Rake-Valven und flache Richardson-Valven mit Lippe in drei Größen, wodurch die Exposition schrittweise durch eine kleine Öffnung aufgebaut werden kann.

Alle Komponenten sind aus nichtmagnetischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) gefertigt. Das Bookwalter Small Incision Retractor System ist fabrikneu, wiederverwendbar und voll autoklavierbar. Es wird unsteril geliefert – Reinigung und Sterilisation müssen vor dem Gebrauch gemäß den validierten Verfahren der Gesundheitseinrichtung erfolgen. Das System wird in einer maßgeschneiderten perforierten Sterilisationsbox geliefert, die jede Komponente für die Aufbereitung und Lagerung organisiert. Retractor Maker fertigt das System in Sialkot, Pakistan, und liefert es direkt an Krankenhäuser, Chirurgen und Händler, mit einer Mindestbestellmenge von einem kompletten Set.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest