



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Système d'écarteur de chirurgie générale Bookwalter
StrongArm

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016


✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron

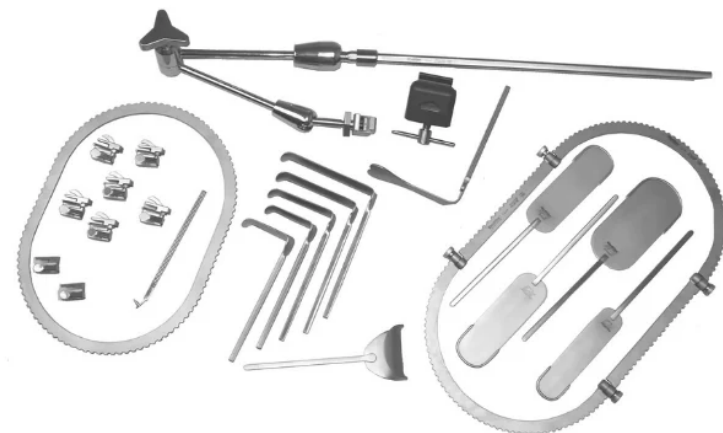

Système d'écarteur de chirurgie générale Bookwalter StrongArm

SKU RM-BSAGSRS-1

\$2,199 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Support StrongArm PLUS à montage supérieur	Réglable en hauteur / Articulé
1	Étau sur rail robuste	Compatible avec le rail de table
2	Mécanismes à crémaillère	Standard sans inclinaison
6	Mécanismes à crémaillère inclinable	Multi-angles
1	Anneau segmenté	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	Anneau segmenté	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
1	Valve Balfour	2⅝" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
2	Valves Kelly	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
1	Valve Kelly	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
1	Valve Kelly	2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)
1	Valve Kelly	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Valve Harrington	1" × 5⅝" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
1	Valve Gelpi	Standard
1	Valve malléable	3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
2	Valves malléables	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Valve malléable	1½" × 6" (3.8 × 15.2 cm)
1	Boîte de stérilisation	Boîtier de protection

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le système d'écarteur de chirurgie générale Bookwalter StrongArm est un système d'écartement autostatique monté sur le support StrongArm PLUS. Le support s'ancre à la table d'opération et soutient le cadre d'écartement, offrant une exposition chirurgicale stable et mains libres lors des procédures de chirurgie générale ouverte.

Le système de montage se compose d'un support StrongArm PLUS articulé à montage supérieur, réglable en hauteur, et d'un étau sur rail robuste compatible avec le rail de la table. Deux anneaux segmentés sont fournis — 10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm) et 10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm) — afin que le cadre puisse être dimensionné et reconfiguré selon la longueur de l'incision.

Deux mécanismes à crémaillère standard non inclinables et six crémaillères inclinables multi-angles maintiennent chaque valve à la profondeur et à l'angle requis. Le jeu de valves comprend une valve Balfour, quatre valves Kelly en longueurs 3", 4", 5" et 6", une valve Harrington, une valve Gelpi et quatre valves malléables en tailles 3" × 6", 2" × 6" et 1½" × 6", couvrant une large gamme d'expositions chirurgicales générales.

Tous les composants sont fabriqués en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique). Le système d'écarteur de chirurgie générale Bookwalter StrongArm est neuf, réutilisable et entièrement autoclavable. Il est livré non stérile — le nettoyage et la stérilisation doivent suivre les procédures validées de l'établissement de santé avant utilisation. Le système d'écarteur de chirurgie générale Bookwalter StrongArm est livré dans une boîte de stérilisation pour un stockage et un traitement organisés. Retractor Maker fabrique le système à Sialkot, au Pakistan, et le fournit directement aux hôpitaux, chirurgiens et distributeurs, avec une quantité minimale de commande d'un ensemble complet.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest