



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Bookwalter para Cirurgia Geral

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

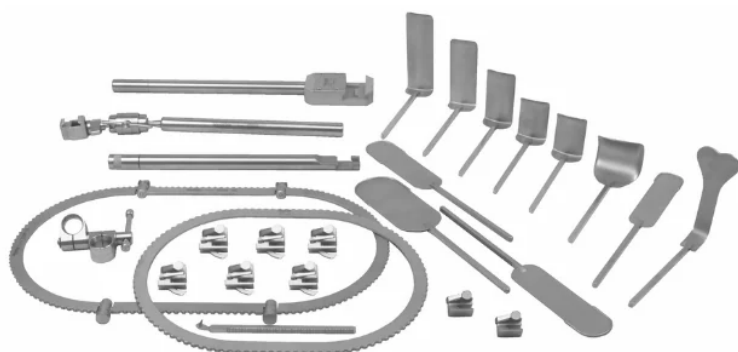

Afastador Bookwalter para Cirurgia Geral

SKU RM-BGSR-1

\$1,999 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Coluna de Campo	12" (30.5 cm)
1	Barra Horizontal	Padrão
1	Acoplador de Coluna	Padrão
1	Barra Flexível Horizontal	1" Diâmetro (2.5 cm)
2	Cremalheiras Padrão	Sem Inclinação
6	Mecanismos de Cremalheira com Inclinação	Multiangular
1	Anel Oval, Médio	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	Anel Segmentado, Médio	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
1	Lâmina Balfour	2⅝" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
2	Lâminas Kelly	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
1	Lâmina Kelly	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
1	Lâmina Kelly	2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)
1	Lâmina Kelly	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Lâmina Maleável	3" x 6" (7.6 x 15.2 cm)
2	Lâminas Maleáveis	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	Lâmina Maleável	1½" x 6" (3.8 x 15.2 cm)
1	Lâmina Harrington	1" x 5⅝" x 2½" (2.5 x 14.3 x 6.4 cm)
1	Lâmina Gelpi	Padrão
1	Caixa de Esterilização	Estojo Protetor

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Bookwalter para Cirurgia Geral é um sistema de retração autoestático montado na mesa, desenvolvido para garantir exposição estável e mãos-livres em procedimentos cirúrgicos abdominais abertos e gerais. Sua estrutura modular integra uma coluna de campo, barra horizontal, barra flexível horizontal, acoplador de coluna, anéis afastadores e mecanismos de cremalheira ajustáveis para suportar as lâminas selecionadas ao redor do campo operatório.

A configuração para Cirurgia Geral inclui um anel oval médio, um anel segmentado médio, duas cremalheiras padrão sem inclinação e seis mecanismos de cremalheira com inclinação multiangular. O conjunto também inclui lâminas Balfour, Kelly, maleáveis, Harrington e Gelpi em diferentes configurações.

O sistema completo é fornecido em uma caixa de esterilização dedicada para armazenamento e processamento organizados. O Afastador Bookwalter para Cirurgia Geral é fornecido não estéril, sendo reutilizável e autoclavável. A limpeza e a esterilização devem ser realizadas de acordo com os procedimentos validados da unidade de saúde antes do uso.

A Retractor Maker fornece o Afastador Bookwalter para Cirurgia Geral diretamente para hospitais, distribuidores e outros clientes B2B.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest