



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Système d'écarteur de chirurgie de la main Bookwalter

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron

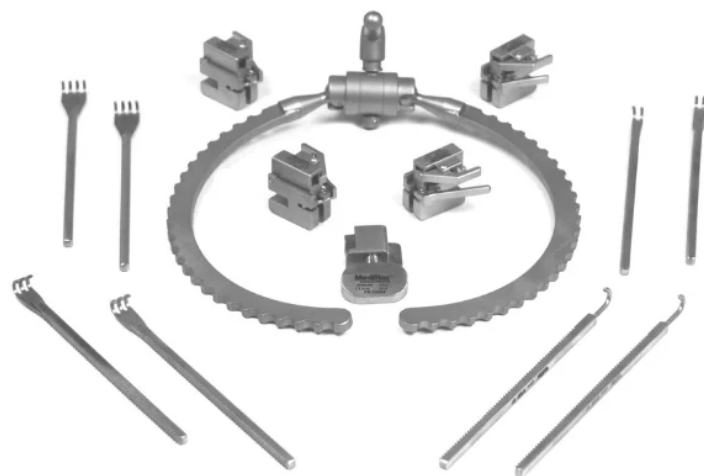

Système d'écarteur de chirurgie de la main Bookwalter

SKU RM-BHSRS-1

\$999 USD

Liste des composants

Quantité	Composant	Dimensions / Description
2	Lame Mini-Bookwalter, crochet simple	Standard Mini — pointe pointue ou mousse
2	Lame Mini-Bookwalter, crochet double	Standard Mini — pointe pointue ou mousse
2	Lame Mini-Bookwalter, crochet triple	Standard Mini — pointe pointue ou mousse
2	Lame Mini-Bookwalter, crochet quadruple	Standard Mini — pointe pointue ou mousse
1	Crémaillère rotative Mini-Bookwalter	Standard Mini
4	Mécanisme de crémaillère inclinable Mini-Bookwalter	Standard Mini
1	Demi-anneau Mini-Bookwalter	7" (17.5 cm)
1	Boîte de stérilisation	Boîtier de protection

Description du produit

Le système d'écarteur de chirurgie de la main Bookwalter est un dispositif autostatique compact conçu pour offrir une exposition stable et mains libres lors de chirurgies délicates de la main, du poignet et des membres supérieurs. L'ensemble s'articule autour d'un demi-anneau Mini-Bookwalter de 7" (17.5 cm), formant le cadre de travail autour du champ opératoire.

Quatre mécanismes de crémaillères inclinables mini et une crémaillère rotative mini fixent les lames incluses sur l'anneau, permettant d'ajuster l'angle et la tension de chaque lame indépendamment. Le système comprend des lames Mini-Bookwalter à crochet simple, double, triple et quadruple, disponibles avec des pointes pointues

ou mousses, afin d'adapter la configuration à l'exposition requise. Un support StrongArm est disponible séparément pour le montage sur table.

Tous les composants sont fabriqués en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique). Le système est réutilisable et entièrement autoclavable.

Le système d'écarteur de chirurgie de la main Bookwalter est livré non stérile. Il doit être nettoyé et stérilisé selon les procédures validées de l'établissement de santé avant utilisation. Retractor Maker, basé à Sialkot, au Pakistan, fabrique et fournit ce système directement aux hôpitaux, aux chirurgiens et aux distributeurs.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest